

为珍贵样品提供更好保护！



# 微量离心管

## 带安全加强型管盖


F I R S T C L A S S · B R A N D

BRAND新型0.5 ml, 1.5 ml及2.0 ml微量离心管有带额外盖扣的规格可选，从而可确保有效的密封并避免意外开启。


- 可121 °C, 2 bar高压湿热灭菌 (DIN EN 285)
- 能承受的最大相对离心力可达30000 g
- 不含RNase, DNase, DNA及内毒素



# 技术信息

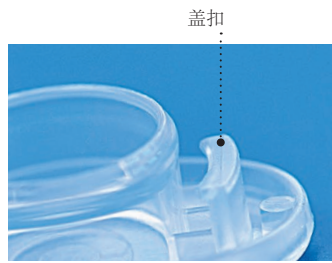

新型BRAND离心管上额外的盖扣，能够保护盖子免受意外开启。

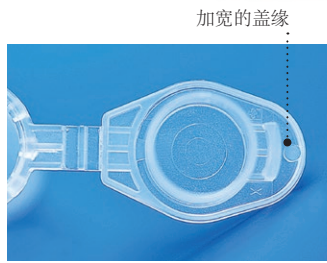

加宽的盖缘方便人手操作。


- 洁净车间生产，符合ISO 14644-1, 8级
- 原材料选用高品质的医用级聚丙烯

- 在不同体积处标有分刻度
- 管盖及管身上含磨砂标记区域

在样品于沸水中的变性过程，以及在一般和加热条件下，离心管需承受很高的压力。

右图显示了开启管盖所需力的大小，单位牛顿(N)。

开盖所需力

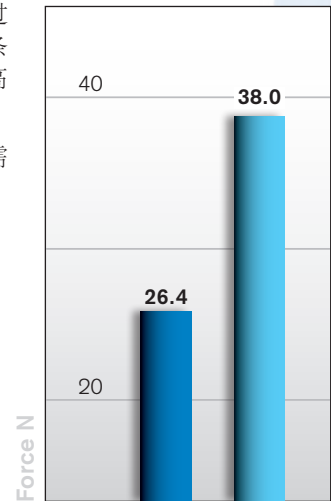

- 带额外盖扣的BRAND微量离心管
- 标准微量离心管

# 订购信息

多种规格满足您的不同需求



微量离心管，安全加强型管盖有效避免意外开启。

容量 ml	数量	货号
0.5	500	7805 36
1.5	1000	7805 40
2.0	500	7805 46

微量离心管，无额外盖扣

产品描述/特殊要求	货号
0.5 ml, 适用于标准样品 (1000个)	7805 07
1.5 ml, 适用于标准样品 (500个)	7805 00
1.5 ml, 适用于高通量作业 (6 x 500个)	7805 02
1.5 ml, 适用于光敏感型试剂, 棕色 (500个)	7805 25
1.5 ml, 适用于多种样品的快速匹配, 黄色 (500个)	7805 21
1.5 ml, 适用于多种样品的快速匹配, 蓝色 (500个)	7805 22
1.5 ml, 适用于多种样品的快速匹配, 绿色 (500个)	7805 23
1.5 ml, 适用于多种样品的快速匹配, 橙色 (500个)	7805 24
1.5 ml, 适用于敏感应用, BIO-CERT® 无菌规格, 无内毒素, DNA, RNase, 及ATP (450个)	7804 00
2.0 ml, 适用于标准样品 (500个)	7805 50
无盖	
1.5 ml, 适用于快速应用 (6 x 2000个)	7805 05

有关BRAND®生命科学产品的更多信息请见[www.brand.de](http://www.brand.de)!

BRAND® 为德国BRAND GMBH + CO KG的商标。其他商标为相应拥有者的财产。

我们的技术文档意为通知与建议我们的客户。当然，许多经验值的实现与在特定测试条件下获得的结果，在实际应用时可能由于不同的因素而超出我们的控制范围。因此，请原谅我们不能承担由我们的建议衍生的要求。使用者有责任确定产品是否符合所需进行的特定应用。

涉及技术信息修改恕不另行通知。可能包含错误。

普兰德 (上海) 贸易有限公司  
 地址: 上海市徐汇区斜土路2899甲号光启文化广场B栋506室  
 电话: +86 21 6422 2318 · 传真: +86 21 6422 2268  
 普兰德公司网址: [www.brand.cn.com](http://www.brand.cn.com) · 电子邮件地址: [info@brand.cn.com](mailto:info@brand.cn.com)

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany  
 Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: [info@brand.de](mailto:info@brand.de) · Internet: [www.brand.de](http://www.brand.de)

